

Useiden sivuonteloiden hoito yhdellä monitoimintoisella laitteella

PALLOLAAJENNUKSEN

ETSIN

VARMISTUS

IMU


HUUHTELU

XprESS™ LoProfile


Useiden sivuonteloiden laajentamiseen
tarkoitettu järjestelmässä



Otsa-, kita- ja poskionteloiden hoito yhdellä monitoimintoisella laitteella

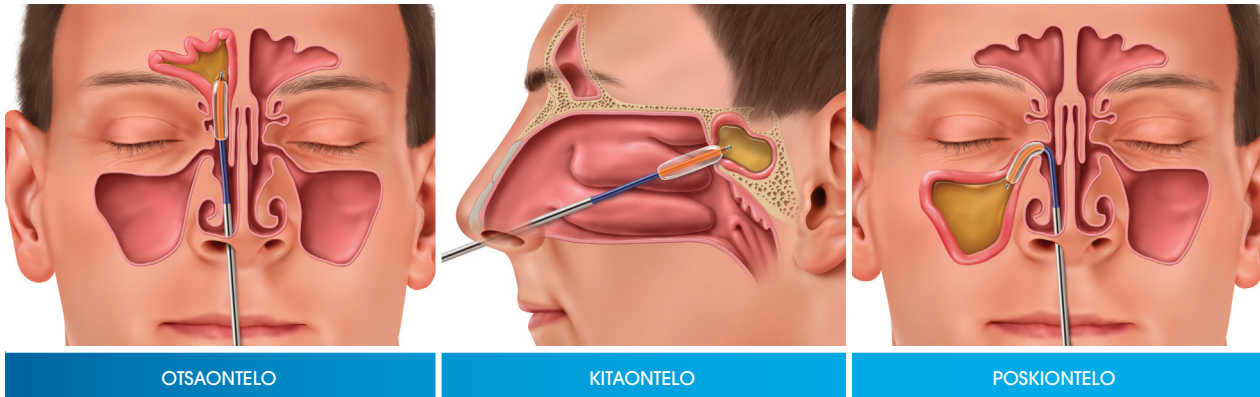

- Todistettu onnistunut pääsy luonnolliseen poskionteloaukkoon ja suppiloon sekä niiden laajentaminen⁵
- Kliinisesti osoitettu sivuontelo-oireiden merkitsevä väheneminen⁵
- Laajentaminen muotoilee sivuontelon luukudosta sisältävää ulosvirtausaluetta siirtämällä viereistä luuta ja nenän vierusontelarakenteita paikaltaan, mikä mahdollisesti vähentää kuduskadon määrää perinteisiin FESS-toimenpiteisiin verrattuna ^{6,7}

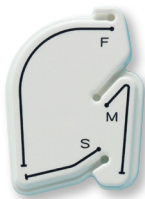

MUOTOILTAVAA KÄRKEÄ
VOIDAAN MUOTOILLA
NOPEASTI HELPPOLLA
VÄÄNTÖTYÖKALULLA

INTUITIIVINEN JA HELPPOKÄYTTÖINEN TÄYTTÖRUISKU
SAAVUTTAA LUOTETTAVASTI 12 atm:n PAINEEN
YHDellä AINOALLA PAINALLUKSELLA



Voit tehdä enemmän monipuolisella ja tehokkaalla XprESS™ LoProfile -järjestelmällä

ENNENNÄKEMÄTÖN MONIPUOLISUUS

- Muotoiltavaa kärkeä voidaan nopeasti uudelleenmuotoilla otsa-, kita- tai poskionteloiden hoitoa varten
- Useita eri pallokokoja, jotka on optimoitu tarkkaa sijoittamista ja potilaskohtaisia tarpeita varten
- Sopii käytettäväksi erilaisten varmistustekniikoiden kanssa, kuten PathAssist™ LED Light Fiber™ ja suora visualisaatio

Poskiontelotaivutusta
varten



Muotoiltava kärki

VERTAANSA VAILLA OLEVA TEHO

- Helppokäyttöinen, kokonaisvaltainen laite tehostaa sivuonteloiden laajennushoitoja
- Kosketustuntuma antaa lisävarmuutta nopeaa ja tarkkaa asetusta varten
- Tehokas tekniikka voidaan helposti ottaa osaksi leikkaussalin, päiväkirurgian tai avohoidon työnkulkua
- Yksinkertainen henkilökunnan koulutus – helppo käyttö ja vähän osia
- Tehostunut varastonhallinta

XprESS™ LoProfile

Useiden sivuonteloiden laajentamiseen
tarkoitettu järjestelmässä

Entelluksen useiden sivuonteloiden laajentamiseen
tarkoitettu XprESS-järjestelmässä yhdistetään useita
toimintoja vain yhteen työkaluun, jolloin sivuonteloiden
laajentaminen voidaan tehdä vähemmän kajoavalla tavalla.

- Pallolaajennus
- Etsin
- Varmistus
- Imu
- Huuhtelu

Muotoiltavaa kärkeä
voidaan nopeasti
muotoilla otsa-, kita-
ja poskionteloiden
hoitoa varten

5, 6 ja 7 mm:n LoProfile



Yhdellä kädellä käytettävä täyttöruiisku tarkasti 12 atm:n
paineeseen aina yhdellä painalluksella



XprESS LoProfile
5 mm ja 6 mm
Compact

Täyttöportti
liittyy suoraan
yhdellä kädellä
käytettävään
täyttölaitteeseen

Kiinteä imu-/
huuhteluportti, jolla
näkökenttä voidaan
puhdistaa tehon
lisäämiseksi

1,75 mm:n
pallokärki
mahdollistaa
ahtaisten tilojen
hoitamisen

Kiinteä PathAssist™
LED Light Fiber™
-valokuitu antaa
suuren intensiteetin
näkökentän
varmistusta varten

Tasainen,
yhdellä sormella
ohjattava pallon
työnnin

Miellyttävä
rakenne, jossa on
kiinteä sormenpää-
imureikä

PathAssist™ LED
Light Fiber™
-valokuituun
sisältyvä virtalähde
ei edellytä
lisävalonlähtettä tai
-kaapeleita



TILAUSTIEDOT

Tilaa soittamalla numeroon (+1) 800-3586046:

LUETTELONUMERO	PALLOKOKO	KUVAUS
LPLF-105-I	5 mm x 18 mm	XprESS™ LoProfile 5 mm ja PathAssist™ LED Light Fiber™
LPLF-106-I	6 mm x 18 mm	XprESS LoProfile 6 mm ja PathAssist LED Light Fiber
LPLF-107-I	7 mm x 18 mm	XprESS LoProfile 7 mm ja PathAssist LED Light Fiber
LPLF-205-I	5 mm x 8 mm	XprESS LoProfile 5 mm Compact ja PathAssist LED Light Fiber
LPLF-206-I	6 mm x 8 mm	XprESS LoProfile 6 mm Compact ja PathAssist LED Light Fiber

TIETOJA ENTELLUS MEDICAL -YHTIÖSTÄ

Entellus Medical tarjoaa innovatiivisia ja korkealuokkaisia vähän kajoavia hoitoratkaisuja terveydenhuollon ammattilaisille ja heidän sivuontelontulehduspotilailleen.

www.EntellusMedical.com

Viitatuille tuotteille on saatu lupa CE-merkinnän käyttöön. Tuotteita ei ehkä ole saatavissa kaikissa maissa.

KÄYTTÖAIHE:

XprESS-laitteen käyttöaiheet: Yhteyden luominen otsaonteloiden sopukoihin, kitaonteloaukkoihin ja poski- ja nenäonteloiden aukkoihin / seulaan suppiloihin sekä niiden hoito aikuisilla transnasaalista reittiä pitkin. Nenän sivuonteloiden luukudosta sisältäviä ulosvirtausalueita muotoillaan uudelleen siirtämällä viereistä luuta ja nenän vierusontelorakenteita paikaltaan pallon avulla.

PathAssist LED Light Fiber -valokuidun käyttöaiheet: Nenän ja sivuonteloiden rakenteiden paikantaminen, sisäinen valaisu ja läpivalaiseminen vähintään 18-vuotiailla potilailla.

Katso varoitusten, varotoimenpiteiden ja haittatapahtumien koko luettelo käyttöohjeista.

HUOMIO:

Yhdysvaltain liittovaltion laki sallii näiden laitteiden myynnin vain lääkärin toimesta tai määräyksestä.

Entellus, PathAssist, Light Fiber ja XprESS ovat Entellus Medical, Inc. -yhtiön tavaramerkkejä.

KIRJALLISUUSVIITTEET:

¹⁻⁷ Julkaistut viitteet ja/tai tiedot ovat Entellus Medical -yhtiön arkistossa.



Entellus Medical, Inc.
3600 Holly Lane North, Suite 40
Plymouth, MN, Yhdysvallat 55447

P (+1) 866 620 7615
F (+1) 763 463 1599
www.EntellusMedical.com

©2015 Entellus Medical, Inc.
3115-011 rA 09/2015