

® in USA


TM

5

PULL THRU

Viisi pyyhinkiekkoa takaa parhaan mahdollisen pesutuloksen

Vallankumouksellinen Endoskooppien kanavien pesumenetelmä

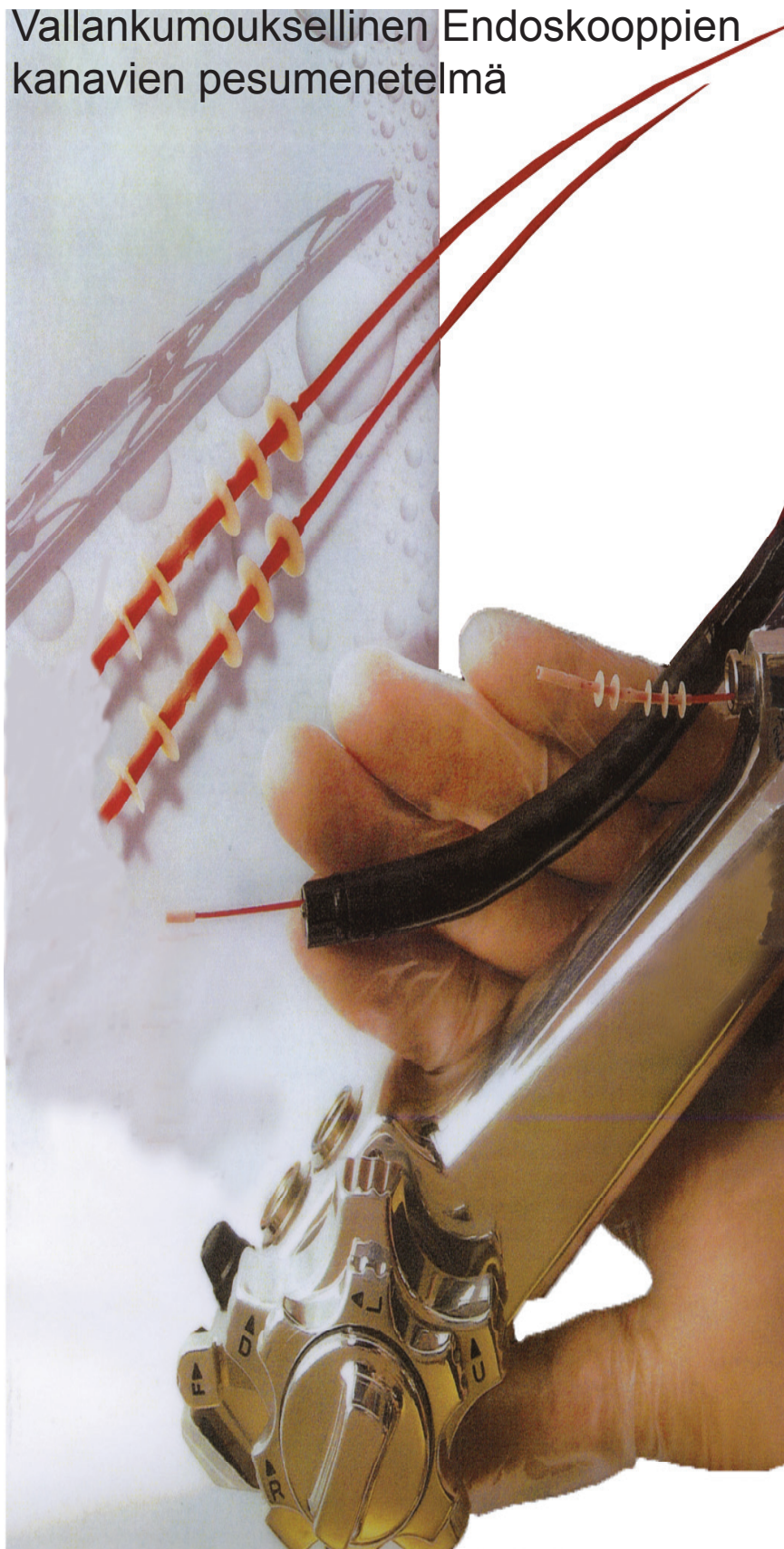

Pull Thru tuoteperhe esittelee uuden, patentoidun menetelmän endoskooppien kanavien pesuun. Kanavien halkaisija voi vaihdella 1,0 -5,0mm välillä. Pull Thru soveltuu kanaville, jotka ovat halkaisijaltaan 2,8mm-5,0mm. Mini soveltuu 1,4-2,6mm kanaville ja Micro 1,0-1,2mm kanaville. Tuoteperheeseen kuuluu myös kanavien suuaukkojen ja venttiilien pesuun tarkoitettu harja, Stubby Brush.

Pull Thru tuotteet on suunniteltu nopeuttamaan kanavien pesua, koska useimmiten yksi läpivienti riittää. Pull Thru tuotteet ovat myös tehokkaampia puhdistajia kuin tavalliset pesuharjat.

Tuotteen patentoitu viiden pyyhinkiekkon menetelmä pesee endoskoopin kanavan täydellisesti ja poistaa lähes kaiken irtolian ja jäännöksen yhdellä läpiviennillä. Viisi pyyhinkiekkoa seuraa toisiaan pienin välimatkoin ja kuljettaa sekä pesuainetta että jäännösliekkaa edellään pois kanavasta.

Pull Thru -tuotteet ovat tutkitusti tehokkaampi menetelmä endoskooppien kanavien pesussa kuin perinteiset harjat. Sen lisäksi tuote säästää välinehuollon aikaa ja on hankintakustannuksiltaan edullinen.

Pull Thru tuotteet ovat yhteensopivia kaikkien valmistajien endoskooppien kanssa.



OTOPLUG OY

Lisätietoja: Otoplug Oy, Osuusmyllynkatu 7, 33700 Tampere, tel. 03 364 7215